

WONDERCORE

FitSpec



Wonder Core 体組成分析器 取扱説明書

- ◆ ご使用の前に必ず説明書をお読みいただき、指示に従って正しくご使用ください。
- ◆ お読みにになった後は、後で参照できるように大切に保管してください。
- ◆ 本製品を他人に譲渡する場合は、安全に使用できるよう、必ず説明書も一緒にお渡しください。



Available on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

目次

安全上の注意事項	1
製品情報	2
初めての使用と測定	2
測定の開始方法	3
お手入れと清掃	6
製品認証および規格	6
仕様	7
保証について	8

安全上の注意事項


- 使用前に必ずすべての「安全上の注意事項」をお読みいただき、本製品を使用してください。
- 以下の説明に必ず従ってください。

 警告

 使用上の注意	本製品は家庭用の製品であり、健康管理のための機器です。他の用途には使用しないでください。
	使用中に体調が悪化した場合は、すぐに使用を中止し、医師に相談してから指示に従って再度使用してください。
	妊婦の方は使用をお勧めしません。
	ペースメーカーなどの電子機器を身につけている方は、使用を避けてください。電磁波の影響を避けるためです。
	適用年齢は18歳以上の成人のみで、赤ちゃんは体重測定に限りです。
	測定中に滑りやすい場所で足を踏み外さないように注意し、転倒を避けてください。
	製品は平らで安定した地面に置き、強く踏みつけしないでください。測定中は安定した姿勢を保ち、カーペットや柔らかいマットなど不安定な場所では使用しないでください。これにより測定結果が不正確になる可能性があります。
	直射日光が当たる場所や熱源の近くに置かないでください。電子部品が破損する恐れがあります。
	本製品に使用されているバッテリーは専用のもので、他の製品には使用できません。また、自分でバッテリーを交換しないでください。
	精密機器ですので、強い衝撃を与えたり、振動させたり、外力で衝突させたりしないでください。
	体脂肪計は安全で乾燥した通気性の良い場所に保管してください。湿度の高い場所（例：浴室）での使用は避けてください。
	尖った物で製品の表面を傷つけたり、破損させたりしないようにしてください。

製品情報

- A 検出ハンドル
- B ハンドル電極パッド
- C ディスプレイ画面
- D 踏み台電極パッド
- E Type-C充電ポート
- F 滑り止めパッド

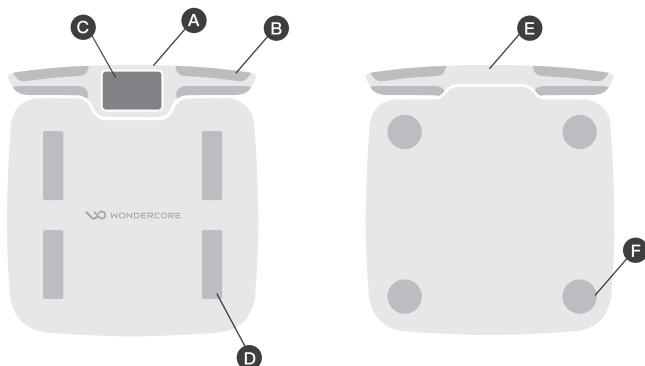

初めての使用と測定


STEP 1 Wonder Core アプリをダウンロード

1. スマートフォンで検索するか、QRコードをスキャンして、Wonder Core アプリをダウンロードしてください。
2. アプリの指示に従って登録し、ログイン後、個人情報を設定してください。



STEP 2 体脂肪計と接続

1. 体脂肪計を平らな地面に置いてください。
2. Wonder Core アプリを開き、デバイス画面に進んでください。
3. 右上の「+」アイコンをタップし、FitSpec を選択してください。
4. アプリの指示に従って接続を行ってください。

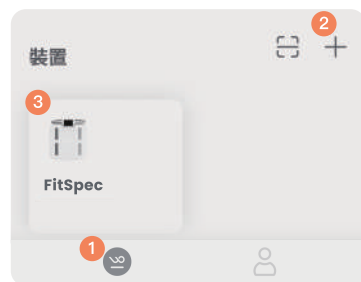

STEP 3 バインド成功、使用開始

デバイスのバインドが成功し、初回測定が完了した後、デバイスページで「FitSpec」をタップして、測定結果と履歴を確認できます。

測定の開始方法

方法 1：本体のみでの測定


1. 裸足で体重計に乗り、両足を足踏み電極パッドに乗せてください。画面が点灯します。
2. 検出ハンドルを引き上げ、全ての指と手のひらをハンドル電極パッドにしっかりと合わせてください。
3. 画面の指示に従って測定を開始し、完了後に画面で測定結果を確認できます。

注意：このモードはアプリと接続していないため、体重のみの測定が可能です。



方法 2：アプリ接続による測定

1. アプリにログイン後、「FitSpec」をタップし、「測定開始」ボタンを選択して、体脂肪計を接続します。

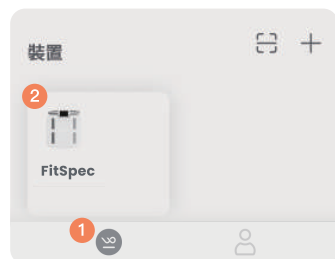

注意：画面が点灯している状態でのみ、接続が成功します。

2. 画面が点灯した後、裸足で体重計に乗り、両足を足踏み電極パッドに乗せます。
3. 検出ハンドルを引き上げ、全ての指と手のひらをハンドル電極パッドにしっかりと合わせます。
4. 指示に従って測定結果を待ち、完了後はアプリで測定結果を確認できます。

リセット方法

1. ハンドルの左右のボタンを同時に長押しし、機器が再起動するまで待ってください。




測定前の注意事項

測定結果の安定性を確保するため、以下の正しい姿勢を保ってください。


一、体幹と四肢

- ・ 腕が腹部に触れないようにし、腕を高く上げず、腕はまっすぐに伸ばし、体の横に触れないようにしてください。
- ・ もし腕が体に触れてしまう場合は、軽い袖のある上着を着用してください。


○ 四肢と体幹が接触しない、
腕はまっすぐに伸ばす

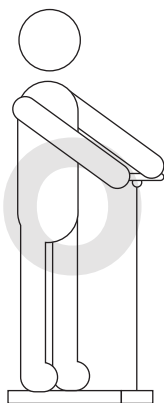

X 腕が高すぎる

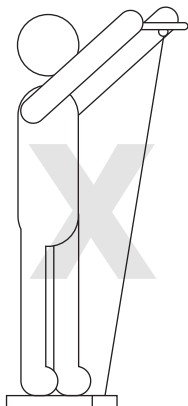


X 腕が低すぎる

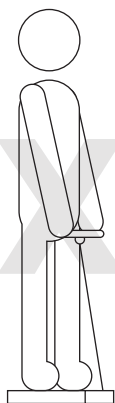

二、手の位置

- ・ 両手を離して、指先と手のひらをハンドル電極パッドにしっかりと合わせてください。


○ 両手が接触しない

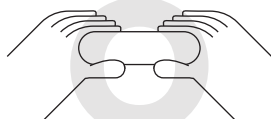

X 両手が接触している



X 指が電極パッドから離れている

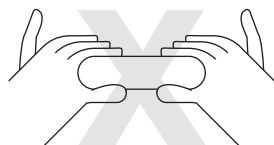

三、脚の位置

- ・両足は離しておき、もし両足が触れてしまう場合は、軽いショートパンツを着用して再度測定してください。
- ・足の裏を前後に合わせて足踏み電極パッドに乗り、裸足で体重計に乗ってください。靴下は履かないでください。



測定精度を確保するために

正確な結果を得るためには、以下の事項を遵守し、影響を与える要因を排除してください。

① 個人情報の正確性を確認：

性別、年齢、身長を正しく入力してください。誤った情報は測定結果に影響を与えます。

② 食後の測定を避ける：

食事後、胃の中の食べ物が測定精度に影響を与える可能性があるため、空腹時に測定するか、食後3～6時間以上経過してから測定してください。

③ 金属製品を着用しない：

測定前に体に付けている金属のアクセサリや装飾品を外してください。

④ 午前中に測定することを推奨：

長時間の立ち仕事や座りっぱなしが体内の水分分布に影響を与えるため、午前中の測定が最も正確です。身。

⑤ 入浴後、マッサージ後、風呂後は測定を避ける：

血行が良くなり、汗をかくことで体の成分が一時的に変化するため、これらの後の測定は避けてください。

⑥ 測定前に5分間立つ：

長時間寝ていたり座りっぱなしの後には、体内の水分分布に影響を与えるため、測定前に立って5分間待ってから測定を行ってください。

⑦ 軽装を着用する：

測定時は厚着を避け、軽い服装で測定してください。

⑧ 外的要因を減らす：

同じ時間帯、同じ場所で測定することをお勧めします。外的要因を減らすことで、より正確なデータが得られます。

⑨ 運動後の測定を避ける：

運動後は体の成分が一時的に変化し、測定結果に影響を与える可能性があります。

お手入れと清掃

- 1. 定期的に柔らかい乾いた布やアルコールを含んだ綿布で体重計の表面を軽く拭いて、ほこりや汚れを取り除いてください。
- 2. 強酸や強アルカリを含む洗剤の使用は避けてください。これにより、体重計の表面や内部の電子部品が損傷する可能性があります。
- 3. 清掃時には水や他の液体が体重計の内部に浸透しないように注意してください。液体が内部に入ると、製品が故障する原因になります。

製品認証および規格

低出力電波機器技術規範

試験証明を取得した低出力電波機器は、許可なく会社や商号、使用者が周波数を変更したり、出力を強化したり、設計の特性や機能を変更したりすることはできません。

低出力電波機器の使用は、航空安全に影響を与えず、合法的な通信に干渉してはいけません。干渉が発生した場合は、直ちに使用を中止し、干渉が解消されるまで再使用してはいけません。上記の合法的な通信とは、電気通信管理法に基づいて運用される無線通信を指します。低出力電波機器は、合法的な通信や工業、科学、医療用の電波放射性電機機器の干渉を受けることがあります。



部品	制限物質および化学記号									
	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	スチール (Cd)	六価クロム (Cr+6)	ポリ塩化 ビフェニ ル (PBB)	ポリ臭化ジ フェニルエ ーテル (PBDE)	フタル酸ジ フェニル (DEHP)	ジエチルヘ キシルフ タレート (BBP)	ブチルベン ゼン (DBP)	ジブチル フタレー ト (DIBP)
プラスチック外装	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
回路部品	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部品	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ゴム部品	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バッテリー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備註1. 「0.1 wt%以上」 および 「0.01 wt%以上」 は、制限物質の含有率が基準値を超えていることを指します。 備註2. 「○」 は、その制限物質の含有率が基準値を超えていないことを指します。 備註3. 「—」 は、その制限物質が除外項目であることを指します。										

規格

型番	WC-FS-01		
サイズ (長×幅×高さ)	375 x 352 x 35 mm		
重量	2.7 kg		
使用重量制限	182 kg		
測定範囲	0.1 ~ 180 kg	測定単位	kg / st:lb / lb
バッテリー容量	800 mAh	充電方法	Type-C
充電時間	2 ~ 2.5h	使用時間	約90日
ディスプレイ	TFT 3.5インチスクリーン		
BLUETOOTH®	5.0		
材質	ABS、強化ガラス、ステンレス、ゴム		
製造地	台湾特許取得、中国本土製造		
用途	体脂肪計		



本製品は家庭用で、健康管理目的のみで使用してください。
その他の用途には使用しないでください

製造業者/輸入業者: 萬達康股份有限公司
会社住所: 407台中市西屯区朝富路213号32F
カスタマーサポート電話: 04-37070446
官網:www.wondercore.com

保証について

● 保証範囲：

当社が製造、委託製造、代理または販売した製品は、正規に販売され、未払いの請求や未解決の金銭的争いがない場合に、本規約が適用されます。保証サービスが必要な場合は、必ず当社（以下「本社」）に連絡し、原始購入インボイスまたは本社店舗の品質保証書を提示してください。その際に保証サービスが有効となりますので、品質保証書およびインボイスは大切に保管してください。

● 製品保証内容：

製品の製造元は、販売された製品に対して1年間の保証を提供します。保証期間は購入日から計算されます。製品に欠陥がある場合や配送中に不具合が発生した場合は、商品到着から7日以内であれば交換が可能です。購入者が製品を転売または譲渡した場合、保証期間は終了します。保証期間内で、正常に使用している状態で製品に製造または組立の欠陥が確認された場合、本社は無償で修理または欠陥部品の交換を行います。保証規定に従って交換された部品については、本社に所有権が移ります。また、修理または交換された部品にも本保証規定が適用されます。

● 製品保証の実施手順：

- (1) 顧客が製品に欠陥、故障、不具合があることを確認する。
- (2) 保証ラベルおよびパッケージを確認し、製造日を特定して、製品が保証期間内であることを確認する。
- (3) 本社に連絡し、故障の詳細を説明する。これにより、保証規定に合致するか確認する。
- (4) 本社は、実際の取引状況および顧客の要求に基づき、回収のスケジュールおよびその後の処理を調整する。
- (5) 顧客は、本保証書に基づき、無料修理または部品交換を受けた後、同じ理由で返品、返金、新品交換、価格引き下げ、その他の損害賠償請求を本社または製造元に対して行うことはできません。

● 製品技術サポート：

製品販売前に、本社は製品の詳細説明書、仕様書、使用および保存方法に関する注意事項を提供します。顧客は使用前に、提供された製品情報を完全に理解し、正しく使用および保存する責任があります。

● 製品保証の除外条項：

以下の状況では、保証責任を免除することができます。

- (1) 顧客が提供した故障品が本社製品でないと確認された場合。
- (2) 故障品が保証期間を超えて使用されている場合。
- (3) 本社の認可を受けていない業者が製品の修理やメンテナンスを行った場合、または誤使用、無許可での部品交換や修理により製品が損傷した場合。
- (4) 故障品が製造元または製造元の認可を受けた業者によって修理されていない場合、または誤使用や不適切な部品交換や修理により製品が損傷した場合。
- (5) 故障品の出所が不明で、違法または財務上の争いがある場合。
- (6) 製品の部品が自然に消耗した場合。
- (7) 火災、水害、地震などの不可抗力による故障。
- (8) 個人使用の製品で、開封または使用済みのもの。
- (9) 顧客が故意に故障を引き起こした場合、または製品説明書に従わず正しく使用・保存されなかった場合。

